


動物用デジタルラジオグラフィ

MXI-710GV

DIGITAL
RADIOGRAPHY
SYSTEM

経済性と高画質を両立したデジタルラジオグラフィ

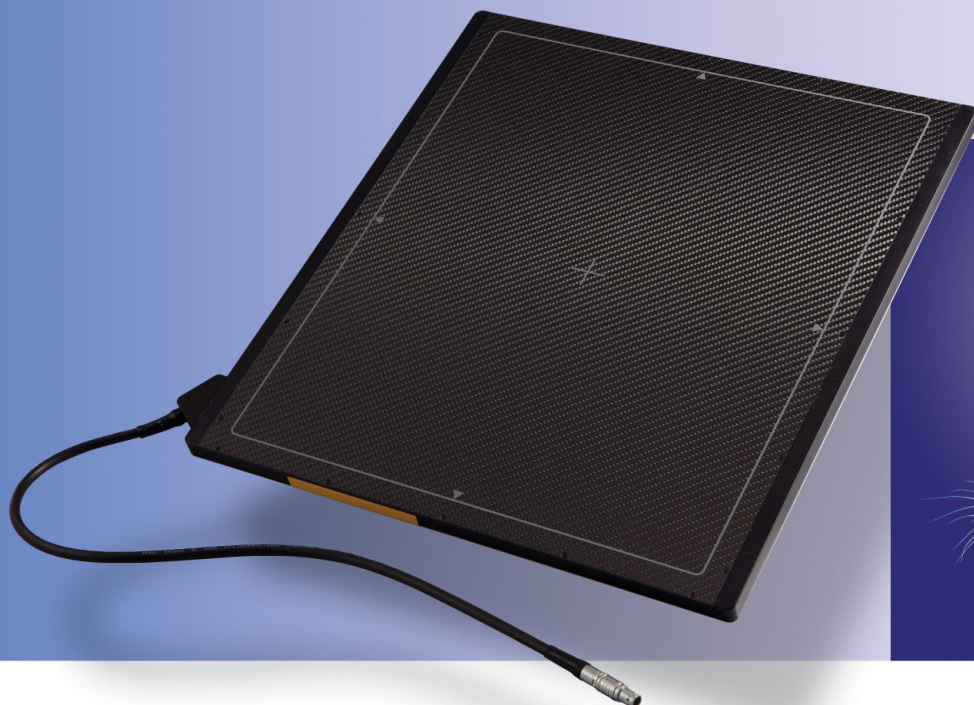

Cost Performance

- シンプルな製品構成により、高いコストパフォーマンスを実現
- お使いのX線撮影装置がそのままご使用できます



High Quality

- 高精細(ピクセルピッチ127 μ m)で信頼性の高い本格的フラットパネル採用
- 安定性に優れたGOSシンチレータと高速有線接続を採用




Easy Operation

- 撮影後約2秒でプレビュー画像を表示、画像の確認が可能
- X線自動検出(オートトリガー)機能搭載
- ご要望に合わせ、使いやすいシステムをご提案します。

仕様一覧表

販売名		デジタルラジオグラフィ MXI-710GV
一般的名称		診断用画像処理装置
クラス分類		一般医療機器
動物用医療機器届出番号		29動薬第1588号
センサーユニット	撮影対象	一般撮影用
	撮影方式	シンチレータ+アモルファスシリコン(a-Si)(TFT Array)
	シンチレータ	GOS(Gd ₂ O ₂ S:Tb)
	ピクセルピッチ	127 μm
	有効画素数	2,756×3,268(約901万画素)
	撮影サイズ	351.8×416.6mm(14"×17")
	A/D変換	14bit
	使用環境の条件	温度：5℃～40℃ / 湿度：30～75％RH
	寸法 / 質量	W417mm×D460mm×H15mm / 3.38kg
	荷重制限	面荷重：150kg / 部分荷重：100kg(直径40mm)
電源ボックス	使用電源	AC100-240V(50Hz/60Hz)
	定格入力	1.0-0.5A
	寸法 / 質量	W188mm×D92mm×H41.5mm / 0.5kg


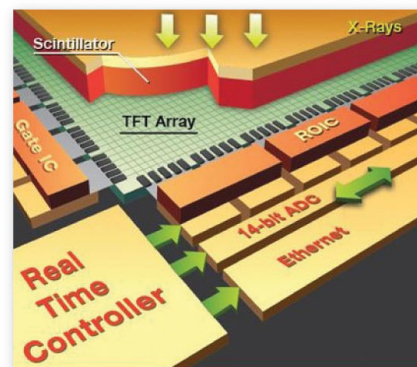


ケーブル(付属品)

	長さ	質量
電源コード	1.8m	0.18kg
LANケーブル	10m	0.36kg
リンクケーブル	7m	0.64kg

システム構成例

ご利用環境に合わせた低コストで使いやすいデジタル画像診断システムをご提案します。

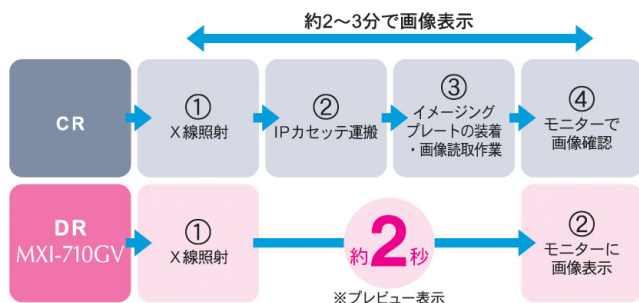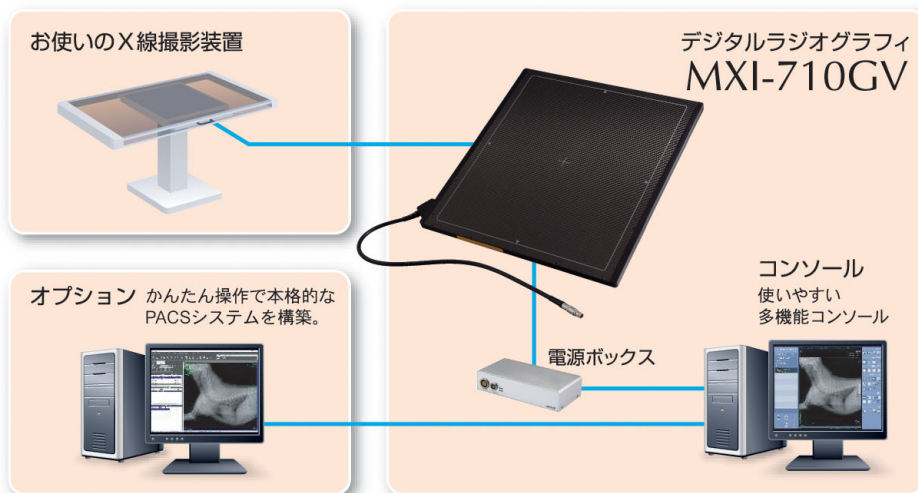

付帯コンソールの主な機能

画像処理

- 画質調整の自動処理・最適化
- 撮影部位毎のプリセット搭載

出力

- PACSへの画像送信
- 紹介用CD作成
- DICOMプリント

ビューア機能

- 各種検索機能
- 距離計測
- 拡大・縮小

オプション



ハンドル



X線装置接続ユニット

製造販売業者

東朋グループ

株式会社ダイトマイテック

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目10番22号 東朋ビル4F

販売業者

株式会社 **ダイトマイテック**

東京 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-25-3-102 TEL 0422-55-0361

名古屋 〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目10番22号 東朋ビル4F TEL 052-251-7241

大阪 〒574-0077 大阪府大東市三箇6丁目15番15号 TEL 072-875-5171

福岡 〒816-0845 福岡県春日市白水ヶ丘3丁目16 TEL 092-585-7331

ホームページ mi-tech.jp

お客様に安全にお使いいただくために保守契約を推奨させていただいております。

お求めは信用のある当店で

仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。2017年9月現在